





SuperLine & SuperLine II

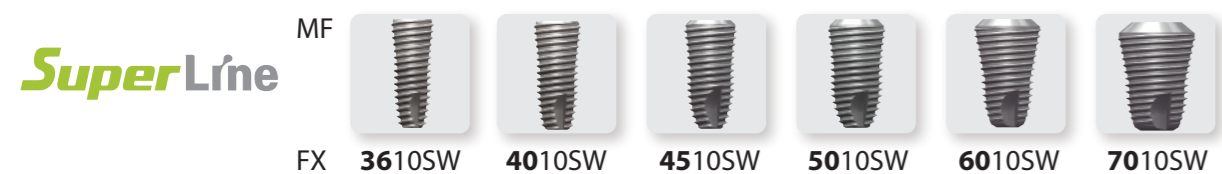

即 / 刻 / 种 / 植 / 也 / 可 / 获 / 得 / 良 / 好 / 骨 / 反 / 应

登腾种植体

SuperLine  SuperLine II

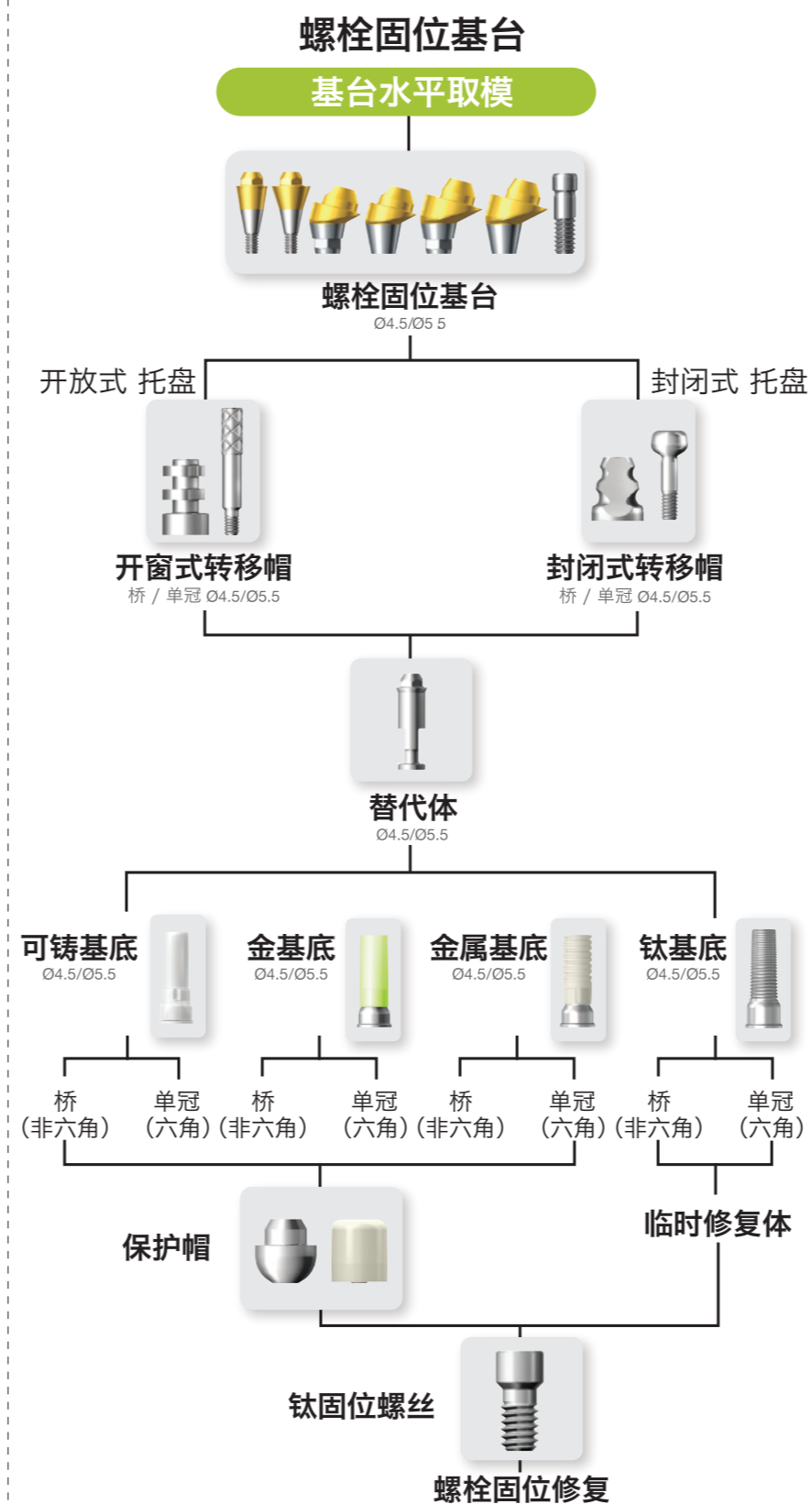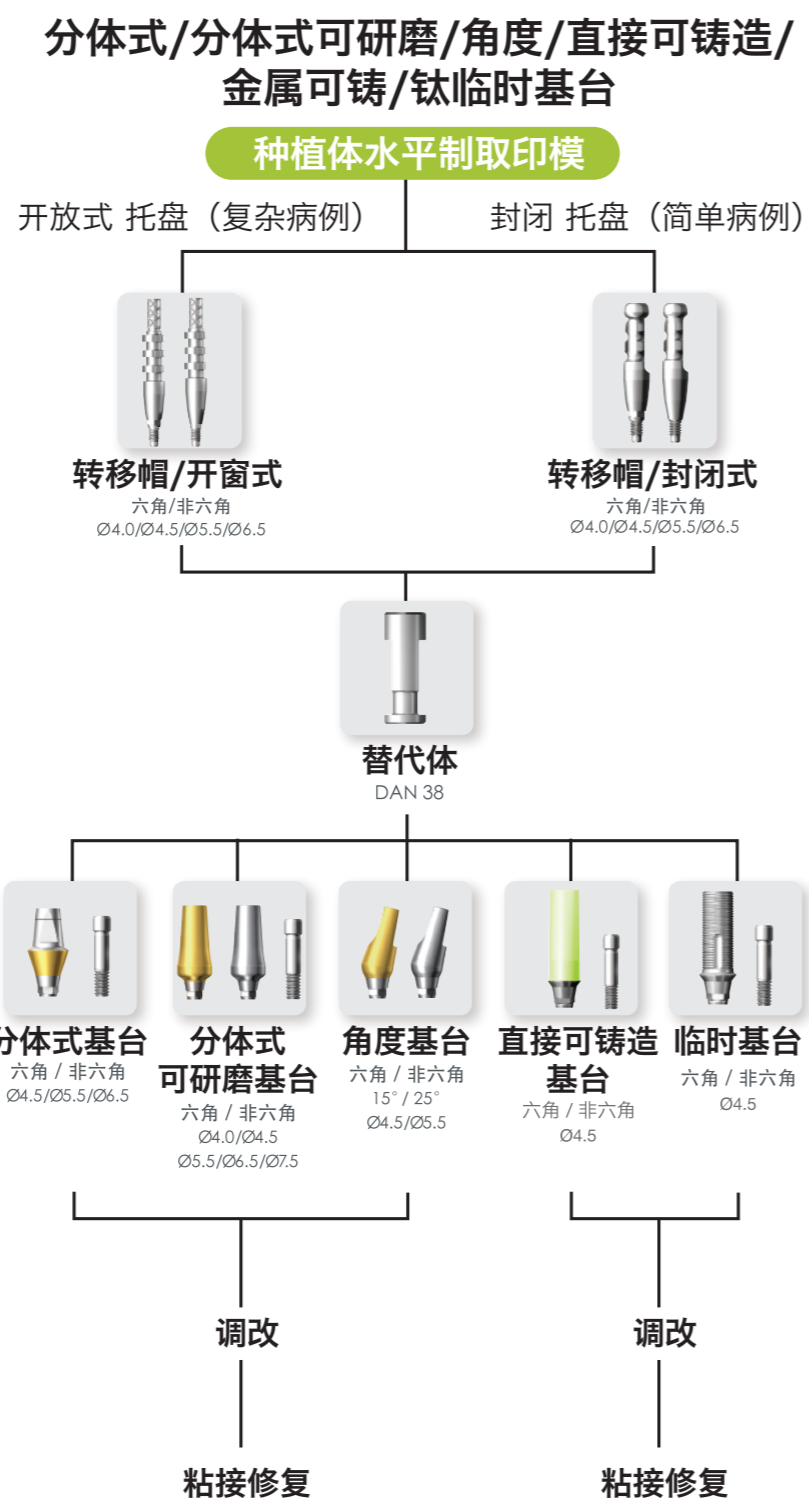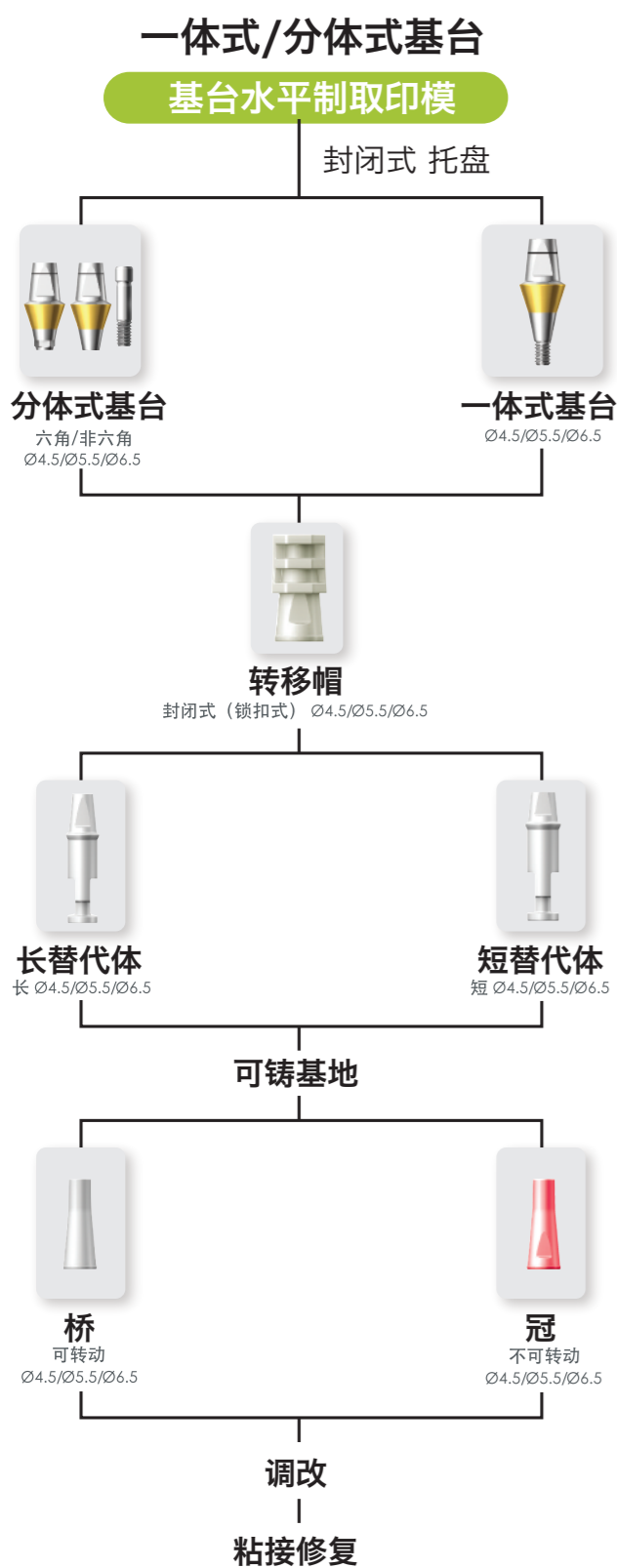

Dentium 登腾
For Dentists By Dentists

SuperLine



即刻种植也可获得良好骨反应

- ✓ 即刻种植可在拔牙窝内获得更好的初期稳定性
- ✓ 在后牙区可行早期负荷
- ✓ 解剖学上的协调性
- ✓ 锥形设计，植入快速

按直径分定瓶帽颜色

- 不包括覆盖螺丝 (单位: mm)

瓶帽颜色	黄色	绿色	蓝色	红色	橙色	紫色
种植体 SuperLine (不含携带体)						
平台Ø	3.6	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
种植体底部直径	3.4	3.8	4.3	4.8	4.8	5.8
斜面 L:7 种植体斜面高度	0.3	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5
斜面 L:8, 10, 12, 14 种植体斜面高度	0.15	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0

SuperLine II





- ✓ **长期稳定性**
种植体与骨接触面积增大螺纹深度和螺纹间距增加
- ✓ **长切割刃**
增加自攻性骨质硬的情况下植入,也不会导致扭力值过大
- ✓ **螺纹设计最大优化**
螺纹更加锋利,在骨质硬的时候也可以很好的植入适用于即刻&早期负重
- ✓ **良好的兼容性**
兼容于SuperLine1代工具盒和所有配件
- ✓ **手术更便利**
提高手术效率

按直径分定瓶帽颜色


- 不包括覆盖螺丝 (单位: mm)

瓶帽颜色	黄色	绿色	蓝色	红色	橙色	紫色
种植体 SuperLine II (不含携带体)						
平台Ø	3.7	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
种植体体部直径	3.6	4.0	4.5	5.0	5.0	5.8
斜面 L:7 种植体斜面高度	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
斜面 L:8, 10, 12, 14 种植体斜面高度	0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0

加长的切割边缘

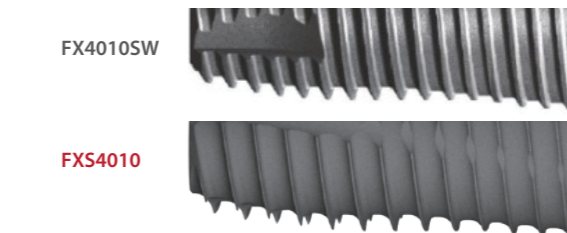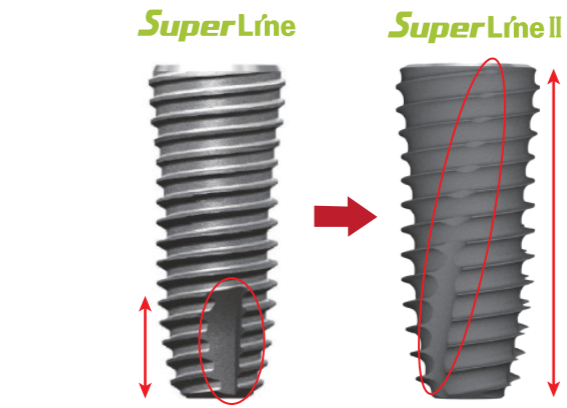

- 增加植体自攻性，提高植入效率
- 改善植入扭矩，使医生操作更容易

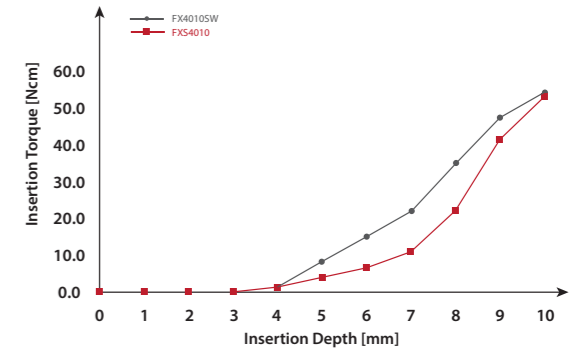


- 4mm~9mm植入深度，2代种植体植入扭矩明显减少，但是最终10mm深度上，即最终植入扭矩无明显差异

- 能够很好的改善植入扭矩，在骨密度较高的时候也不会有植入扭力值过大的情况


- 增加植体自攻性，提高植入效率
- 充分保证植入颈部的初期稳定性

优化螺纹设计

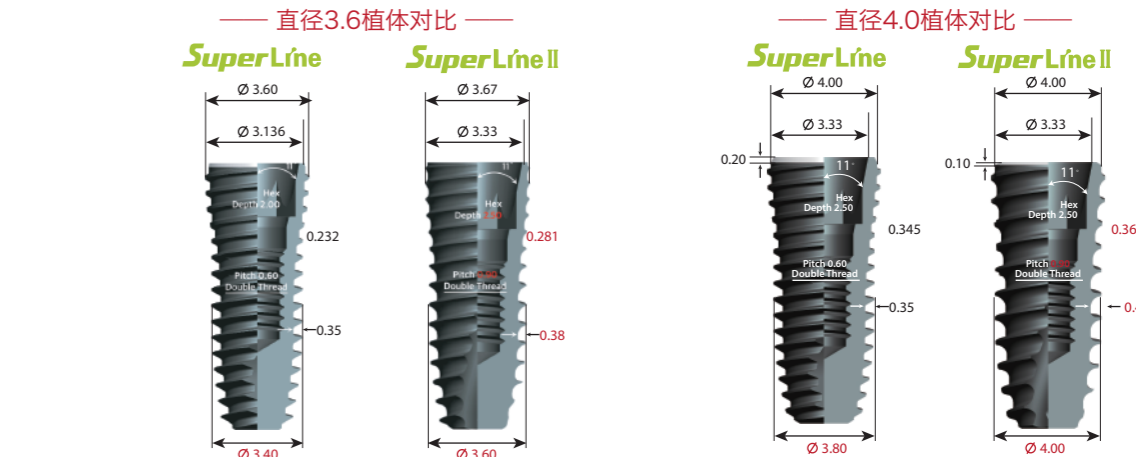

- 增强螺纹深度，螺纹更加锋利，在骨质比较硬的情况下，也可以更好地植入，增加了植体的自攻性
- 与现有的SuperLine相比，植体下方外壁加厚，提升了种植体的强度

增加种植体表面与牙槽骨的接触面积

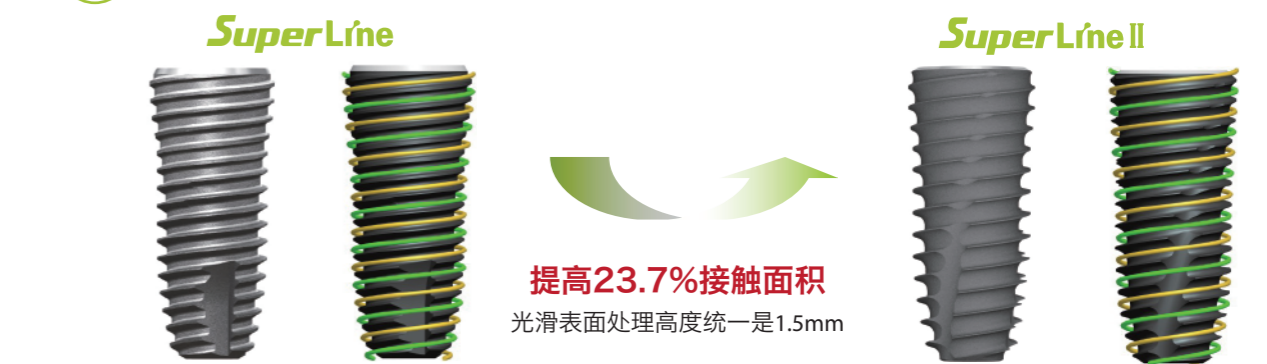

提高23.7%接触面积
光滑表面处理高度统一是1.5mm